

MED^oEL



Sluh za vse življenje
Sistem polževega vsadka SYNCHRONY

hearLIFE



Naslednji koraki

V tem priročniku vam bomo predstavili SYNCHRONY, naš najnovejši in najsodobnejši sistem polževega vsadka. Sistem polževega vsadka SYNCHRONY zagotavlja izjemno kakovost sluha, preprosto uporabo in najvišjo varnost, zato je idealna izbira za otroke.

Če še niste prebrali priročnika Prvi koraki, ki pojasnjuje, kako sluh deluje in kakšno je vsakdanje življenje s polževim vsadkom, najprej preberite tega. Če ste pripravljeni spoznati vse prednosti vsadka SYNCHRONY, nadaljujte z branjem tega priročnika.

Obrnite se na nas za svoj izvod
priročnika Prvi koraki.





Premik naprej

Zavedamo se, da ima pri izbiri polževega vsadka za svojega otroka najvišjo prednost čim boljši sluh. Zato so naši sistemi polževih vsadkov zasnovani tako, da vašemu otroku že v samem začetku zagotovijo naravnejši sluh.



Naši polževi vsadki lahko z edinstveno tehnologijo MED-EL zagotovijo kar najbolj poln in bogat razpon zvokov, podprejo boljše zaznavanje glasbe in govora ter ščitijo sluh vašega otroka.

S sistemom polževega vsadka SYNCHRONY pa smo napravili še en korak naprej. SYNCHRONY vas in vašo družino pospremi na otrokove naslednje korake do vseživljenjskega sluha.

Predstavljamo vam vsadek SYNCHRONY

Sistem slušnega vsadka ima dve glavni komponenti: zunanji govorni procesor in notranji vsadek. Govorni procesor zazna zvočne signale in jih pošlje v vsadek. Vsadek te zvočne signale pošlje skozi notranje uho v možgane, ki jih v realnem času prepoznajo kot zvok.

Govorni procesor

Nosimo ga zunaj za ušesom ali na glavi.



Vsadek

Kirurško vsajen tik pod kožo.



Ključne značilnosti, ki jih je treba upoštevati

- + Preprosta uporaba
- + Vzdržljiv, za vsakodnevno življenje
- + Udobne možnosti nošenja
- + Boljši sluh v vseh okoljih

Več o govornih procesorjih najdete na straneh 6–31

Ključne značilnosti, ki jih je treba upoštevati

- + Izdelan za dolgoročno zanesljivost
- + Združljiv s prihodnjo tehnologijo
- + Prenese MRI 3,0 T brez odstranitve magneta
- + Najnaravnejša kakovost zvoka

Več o vsadkih najdete na straneh 33–41

















SONNET

Zaušesni govorni procesor

SONNET zagotavlja izjemno kakovost sluha v katerem koli slušnem okolju in zmanjšuje potrebo po ročnem prilagajanju nastavitvev ali spreminjanju programov, da bi bilo doživetje poslušanja naravnejše.



-  Najlažji govorni procesor MED-EL (s polnljivim mikrokompletom baterij)
-  Izbirna funkcija EAS omogoča 6-kanalno akustično ojačanje nizkih frekvenc
-  Vodoodporen in varnostno zapečaten
-  Sistem samodejnega upravljanja zvoka Automatic Sound Management 2.0 se dejavno prilagaja spreminjanju slušnega okolja
-  Dvojni mikrofoni omogočajo zmanjšanje šuma in usmerjenost mikrofona
-  Povsem združljiv z vsemi večkanalnimi polževimi vsadki MED-EL
-  Do 60 ur trajanja baterije brez kompromisov v zmogljivosti procesorja
-  Kazalniki LED kažejo, ali je govorni procesor vašega otroka pravilno priključen
-  Možnosti polnljivih baterij za preprosto uporabo
-  Preprosta priključitev na brezžične dodatke
-  Povsem vodotesen ob uporabi dodatka WaterWear
-  Alternativne možnosti nošenja za otroke za dodatno udobje





RONDO 2


Govorni procesor v eni enoti



Stvari nikoli niso bile preprostejše. RONDO 2 je prvi govorni procesor z brezžičnim polnjenjem, zaradi česar je neverjetno preprost za uporabo za vas in vašega otroka. Z ekskluzivno linijo zabavnih okrasnih pokrovov pa lahko vaš otrok odslej svoj procesor ponosno pokaže tudi drugim.





-  Preprosto brezžično polnjenje – odslej brez baterij za enkratno uporabo


 Ves dan sluha z do 18-urnim trajanjem baterije, ki se povsem napolnijo že v 4 urah

 Diskretno umaknjen pod lase

 Za živahen videz lahko izbirate med okrasnimi pokrovi
-  Možnost povezave s pametnimi telefoni in mikrofoni z brezžičnimi dodatki Bluetooth

 Zaščita pred vsakodnevno vlago z vodoodporno zasnovo

 Zabavni trenutki v vodi z ovitki WaterWear

 Samodejno prilagodi glasnost za brezskrbno poslušanje



Prostoročno upravljanje
Sistem samodejnega upravljanja zvoka Automatic Sound Management 2.0 se inteligentno prilagaja, da zagotovi optimalno poslušanje v vseh okoljih.



Izjemno trajanje baterije
Dolgotrajno napajanje iz cink-zrak ali polnljivih baterij.



Otrokom prijazen
SONNET je varnostno zapečaten, ima kazalnik za preverjanje povezave s tuljavo in prilagodljive možnosti nošenja, zaradi česar je odličen za otroke.

Govorni procesor SONNET

Izdelan za vsakodnevno uporabo

Spoznajte SONNET, naš najnovejši zaušesni govorni procesor. SONNET je kompakten in lahek, tako da se zlahka prilega za uho in omogoča celodnevno udobje. SONNET se z inteligentno tehnologijo dvojnega mikrofona samodejno prilagaja in zagotavlja, da vaš otrok sliši čim boljše – tudi v glasnih učilnicah in na vetrovnih igriščih.

To tehnologijo smo zaprli v vodoodporno in varnostno zapečateni obliko, zato da vam ne bo treba skrbeti, kaj počne vaš otrok. Možnosti ActiveWear in BabyWear omogočata udobno nošenje SONNET tudi živahnim dojenčkom in otrokom. SONNET tudi poskrbi, da bo s trajanjem baterije do 4 dni pri polni zmogljivosti vaš otrok dalj časa bolje slišal.



Vodoodporen,
varnostno zapečaten,
otrokom prijazen.



Vodoodpornost

Zasnova je odporna na brizganje vode, izbirni dodatek WaterWear pa zagotavlja popolno vodoodporno zaščito.



Povsem nastavljiv

Bodite neopazni ali pa izstopajte s pokrovi različnih barv in dizajnov.



Akustično ojačanje

Omogoča kombinirano akustično ojačanje, ki omogoča kar najboljši izkoristek preostalega otrokovega sluha.



Poslušanje je zdaj preprosto

Življenje vam včasih precej napolni roke – zato je SONNET zasnovan za prostoročno upravljanje. Če imate SONNET, vam ne bo treba skrbeti glede prilagajanja nastavitev ali spreminjanja programov. Od prvih korakov do prvega dne šole se SONNET osredotoča na prave zvoke v vsakem trenutku.

SONNET se dejavno prilagaja spreminjajočim se slušnim pogojem s sistemom samodejnega upravljanja zvoka Automatic Sound Management 2.0, tako da ste lahko prepričani, da bo vaš otrok slišal kar najboljše, tudi ko vas ni ob njem. Sistem ASM 2.0 združuje usmerjenost mikrofona, zmanjšanje šuma vetra in samodejno uravnavanje glasnosti, da vašemu otroku zagotovi optimalen sluh.

Prostoročno
upravljanje





Sistem samodejnega upravljanja zvoka Automatic Sound Management 2.0

Sistem ASM 2.0 s prilagodljivimi usmerjenimi mikrofoni in inteligentno obdelavo zvoka posnema naravne funkcije ušesa za boljši sluh v katerem koli slušnem okolju.



Usmerjenost mikrofona
Osredotoča se na zvoke pred otrokom, kar mu omogoča lažje poslušanje, zlasti v hrupnem okolju.



Zmanjšanje šuma vetra
Ta funkcija dejavno zmanjšuje moteč šum vetra, ne da bi zadušila govor, kar omogoča boljši sluh zunaj.



Samodejna nastavitve glasnosti
Brezhibno prilagaja glasnost, tako da so mehki zvoki jasnejši, glasni pa so slišati udobneje.



Povezljivost

SONNET s svojimi preprostimi in prožnimi rešitvami omogoča preprosto priključitev zvočnih naprav za jasnejše poslušanje brez šumenja.



Brezžični digitalni sistem

Sistem Roger 21 in drugi brezžični sprejemniki vam omogočajo čim boljšo uporabo brezžičnih mikrofонов v hrupnih okoljih in drugih zahtevnih okoliščinah.



Neposredni zvočni vhod

Uživajte v visokokakovostnem zvoku iz katerega koli zvočnega vira s 3,5-mm priključkom za slušalke, podobno kot pri telefonu, tablici ali na radijski napravi.



Ovratna zanka

Z ovratno zanko Bluetooth boste lahko uživali v odličnem zvoku z brezžičnim prenosom s telefona, tablice in televizorja.



Telefonska tuljava

Preprosto se povežite s telefonom ali sistemom ovratne zanke za razločno poslušanje v gledališču, svetišču, doma in drugod.



Roger 21 družbe Phonak

Roger 21 je brezžični sprejemnik za optimalen sluh v zahtevnih okoljih, ki ga je mogoče zlahka uporabljati s SONNET. Tako je SONNET mogoče preprosto povezati z vrsto brezžičnih mikrofонов Roger. Otrokovo doživetje poslušanja lahko izboljšate s SONNET in Roger 21, pa naj bo to v razredu, po telefonu ali pri gledanju televizije.

roger
by Phonak



SONNET z Roger 21

Brezžična
povezljivost



Povsem napolnjen

Brezskrbni več dni in ne samo ur SONNET poskrbi za sluh vašega otroka za 4 dni z enim samim kompletom cink-zrak baterij. SONNET poskrbi, da vaš otrok ne bo zamudil niti trenutka – vse od zajtrka, pa do glasbene vadbe.

SONNET uporablja dve bateriji za enkratno uporabo, ki ju je mogoče preprosto zamenjati in ki zagotavljata do 60 ur uporabe. SONNET tudi skupaj z baterijami tehta manj kot 11 gramov, tako da ga je mogoče udobno nositi ves dan.



Do 4 dni
uporabe



Polnljive baterije

Uživajte v netežavnem poslušanju s polnljivimi baterijami SONNET. Polnljive baterije je preprosto zamenjati in jih polniti prek USB, zato so odličen način napajanja za govorni procesor SONNET vašega otroka.

Standardne polnljive baterije otroku zagotavljajo do 10 ur neprekinjenega poslušanja. Mikrobaterije SONNET pa poleg 7-urnega delovanja vašemu otroku zagotavlja tudi najlažji govorni procesor, kar jih je na voljo.

Najlažji govorni
procesor, kar jih
je na voljo.





Igra ves dan

Otroci so po naravi zelo živahni in potrebujejo govorni procesor, ki je temu prilagojen. ActiveWear za SONNET pomeni, da na ušesu nosimo samo lahko krmilno enoto, baterijski del pa je pripet na obleko.

Ta lažja možnost nošenja daje otroku svobodo pri njegovih priljubljenih dejavnostih – od nogometa do plesa ali preprostega igranja v parku skupaj s prijatelji. ActiveWear vašemu otroku zagotavlja optimalen sluh, ne glede na to, kakšne vragolije počne.





Majna ušesa

Preprosto poslušanje tudi za najmanjše uporabnike SONNET – BabyWear omogoča, da SONNET dojenčku pripnete na obleko in da mu ga ni treba nositi za ušesom.

Ta možnost nošenja brez pritrditve za uho je odlična rešitev za dojenčke, ki morda še niso pripravljeni na nošenje običajnega zaušesnega govornega procesorja. Svojemu dojenčku lahko omogočite, da raziskuje nove zvoke v njegovi okolici, pri tem pa veste, da je njegov govorni procesor varen in da se ne more sneti.








Izbira in ujemanje

SONNET se lahko skrrije ali pa izstopa, na primer prvi dan v vrtcu ali ko vzamete svojega malega junaka v trgovino. Glavne komponente so na voljo v do 15 različnih barvah, tako da lahko otrok izbira med več stotimi različnimi barvnimi kombinacijami.

Barvni okrasni pokrovi SONNET omogočajo res edinstven videz, ki odraža otrokovo ustvarjalnost. Okrasni pokrovi za domišljijo vsakega posameznega otroka od princes do gusarjev.



Barvne možnosti

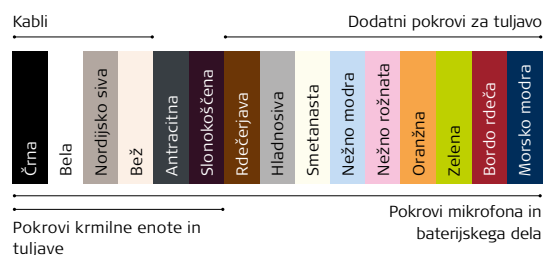

Možnosti okrasnih pokrovov







Dež ali sonce

Otroci so specialisti za odkrivanje vseh dežnih kapljic, luž in zunanjih pršilnikov. Ne skrbite: vodoodporni SONNET bo vedno varoval vašega otroka. SONNET je zasnovan za dinamično življenje ter zagotavlja zaščito pred vodo, znojem in drugo vlago.

Če otrok uporablja SONNET, mu nepričakovan pljusk vode ne bo pokvaril priljubljene dejavnosti. SONNET z dodatkom WaterWear je popolnoma vodotesen, tako da lahko vaša družina mirno uživa ob bazenu ali plaži.





Procesor v eni enoti RONDO 2

Stvari nikoli niso bile preprostejše.

Če želite brezskrbno doživetje sluha, potem je RONDO 2 vse, kar ste iskali. Kompaktno napravo »vse v enem«, ki udobno počiva na otrokovi glavi tik za njegovim ušesom, lahko polepšate z barvitimi okrasnimi pokrovi. Ima samo en preprost gumb za vklop/izklop in za vas samodejno prilagaja glasnost, da vam ni treba nenehno spreminjati nastavitvev.

Kaj pa je največja prednost procesorja RONDO 2? Je edini govorni procesor za polžev vsadek, ki ga lahko polnite brezžično. Nič več menjavanja baterij – vaš otrok lahko ponoči preprosto odloži RONDO 2 na polnilno postajo in ko se zjutraj zbudi, mu čez dan ne bo treba menjati baterije. Konec je z iskanjem baterij zgodaj zjutraj, odpiranja predalov za baterije, vašega otroka čaka samo še ves dan odličnega sluha.



Brez kablov,
brez stikal,
brez skrbi.



Preprosta uporaba
Kompakten in za uporabo preprost procesor »vse v enem«.



Polnjenje je preprosto
Brez menjavanja baterij – napravo lahko napolnite ponoči.



Preprosto nošenje
Skrijte ga z lasmi ali pa bodite drzni z okrasnimi pokrovi.





Za napajanje je poskrbljeno

Z RONDO 2 vam ne bo nikoli več treba skrbeti za baterije. RONDO 2 je prvi govorni procesor s polževim vsadkom, ki omogoča brezžično polnjenje – RONDO 2 samo položite na polnilno postajo in začel se bo samodejno polniti. S 4-urnim polnjenjem boste lahko napravo uporabljali do 18 ur, kar je odlično, če želite napravo polniti ponoči in jo uporabljati ves dan.

To pomeni, da vam ne bo treba več skrbeti, ali ste v otrokov šolski nahrbtnik pripravili nove baterije. Med poukom vašega otroka ne bo več zmotilo piskanje zaradi nizkega stanja napolnjenosti baterije. Vaš otrok si lahko vsako jutro preprosto namesti RONDO 2, nato pa povsem pozabi nanj do konca dne.



Postanite ustvarjalni

Pustite otrokovi domišljiji prosto pot. Barviti okrasni pokrovi naprave RONDO 2, na katerih so različni liki, od piratov do princes, vašemu otroku omogočijo, da ponosno razkazuje svoj govorni procesor. Vsak pokrov preprosto zaskoči na napravo RONDO 2, zato se lahko v samo nekaj sekundah preobrazi iz superjunaka v majhno pošast.





Naravni videz

Če si vaš otrok želi, da njegov govorni procesor ne bi bil viden drugim, lahko RONDO 2 postane skoraj neviden. Noben del te kompaktne naprave ni nameščen na ušesu, kar je popolno za nošenje skupaj z očali, hkrati pa ga je mogoče preprosto skriti z lasmi. Na voljo so tudi posebni okrasni pokrovi z vzorcem las, da lahko vaš otrok izbere RONDO 2 v odtenku svojih las.





Lahkotno poslušanje

Zakaj bi ves dan preklapljali med različnimi nastavitvami? RONDO 2 samodejno uravnava glasnost, ki otroku pomaga jasno in glasno slišati mehke zvoke, kjer koli že je, ne da bi za to morali pritisniti kakršen koli gumb.

Vašemu otroku je tako vedno zagotovljen najboljši sluh, ne glede na to, kam ga vodi pot!





Ostanite povezani

Včasih sluh vašega otroka ni najboljši. Hrupna javna mesta so lahko težavna, pa tudi telefonski pogovor ali učiteljeva navodila.

RONDO 2 se brez težav poveže z ovrtnimi vrvicami Bluetooth in drugimi brezžičnimi dodatki, ki vam zvok pripeljejo naravnost v ušesa tudi v hrupnem prostoru.





Kopanje

Skakanje po lužah ali kolesarjenje po dežju ne predstavlja več težave, saj je RONDO 2 zaščiten pred vlago, da vam ni treba skrbeti zaradi vsakodnevnega pljuskanja. Njegova vodoodporna zasnova nosi oznako IP54, zaradi česar je popolna za igro zunaj, ne glede na vreme!



Zaplavajte

Ne glede na to, ali otrok preživlja dan z družino na plaži ali se igra v kopeli, bo RONDO 2 ostal na varnem in suhem z dodatkom WaterWear. Te vodotesne ovitke za večkratno uporabo je mogoče preprosto namestiti in uporabljati v vseh vrstah voda, vaš otrok pa lahko uživa v aktivnostih, ki jih obožuje.







Ensuring a Hearing Future

Izbira polževega vsadka lahko pomeni življenjsko odločitev. Zato so naši vsadki izdelani za dolgoročno varnost, zanesljivost in za vseživljenski boljši sluh. Predani smo temu, da vam in vaši družini nudimo oporo na celotnem popotovanju vašega otroka do boljšega sluha.

Naše neverjetno mehke in prožne elektrode so zasnovane tako, da bolje zaščitijo občutljive strukture otrokovega polža – in da pomagajo ohraniti preostali sluh ter zagotovijo zdrav temelj za otrokov prihodnji sluh. Svoje govorne procesorje načrtujemo tako, da so združljivi z vsemi našimi vsadki, zato lahko vaš otrok svojega vedno nadgradi z najnovejšo tehnologijo.



Polžev vsadek SYNCHRONY

Prava izbira

Seveda starši vsi želimo le najboljše za svojega otroka. Naš najnovejši polžev vsadek SYNCHRONY vam zagotavlja miren spanec in vedenje, da ste izbrali edini vsadek, ki zagotavlja izjemno kakovost sluha, neverjetno zanesljivost in neprimerljivo varnost pri MRI*.

SYNCHRONY je najmanjši in najlažji polžev vsadek iz titana ter tako popolna izbira tudi za najmlajše otroke. Naša elektrodna polja so najmehkejša in najbolj prožna, tako da ščitijo otrokovega polža in omogočajo naravnejši sluh. In ker je varnost vedno na prvem mestu, SYNCHRONY zagotavlja najvišjo stopnjo varnosti pri MRI izmed vseh polževih vsadkov.



Neprimerljiva
varnost pri MRI



Varnost pri MRI
Magnet s samodejno poravnavo zagotavlja neprimerljivo udobje, varnost in miren spanec v primeru slikanja z MRI.



Prožne elektrode
Ves naš razpon mehkih in prožnih elektrod zagotavlja idealno prileganje edinstvenim potrebam vašega otroka.



Dokazana zanesljivost
Trajna titanova zasnova in robustne varnostne funkcije zagotavljajo dolgoročno stabilnost in zanesljivost.

* Uporabnike polževega vsadka SYNCHRONY je mogoče varno slikati z MRI pri 0,2, 1,0, 1,5 in 3,0 T po pogojih, podrobno opisanih v navodilih za uporabo.





Triformance

Prisluhnite razliki

SYNCHRONY bo vašemu otroku omogočil boljši in naravnejši sluh od prvih zvokov do prvega koncerta. SYNCHRONY vključuje tehnologijo Triformance, ki je kombinacija treh edinstvenih tehnologij družbe MED-EL, ki vašemu otroku omogočajo doseganje polnega slušnega potenciala.

Tehnologija Triformance zagotavlja kakovost sluha, s katero se ne more kosati noben drugi polžev vsadek, saj celotnemu otrokovemu polžu zagotavlja natančnejše zvočne signale in varuje nežne strukture njegovega notranjega ušesa. Vaš otrok bo lahko užival v zvokih, kot v resnici so, v polnejšem in bogatejšem razponu zvokov ter naravnejšem govoru in glasbi.

Prisluhnite razliki na
medel.com/triformance.




»SYNCHRONY je v veliko vidikih edinstven polžev vsadek. Ampak SYNCHRONY je moja prva izbira za otroke, ki prejmejo polžev vsadek zaradi dejstva, da lahko potem gredo na MRI pri 3,0 T.«

Prof. dr. Mario Zernotti
internistični kirurg,
Argentina

MRI

Varnost na prvem mestu

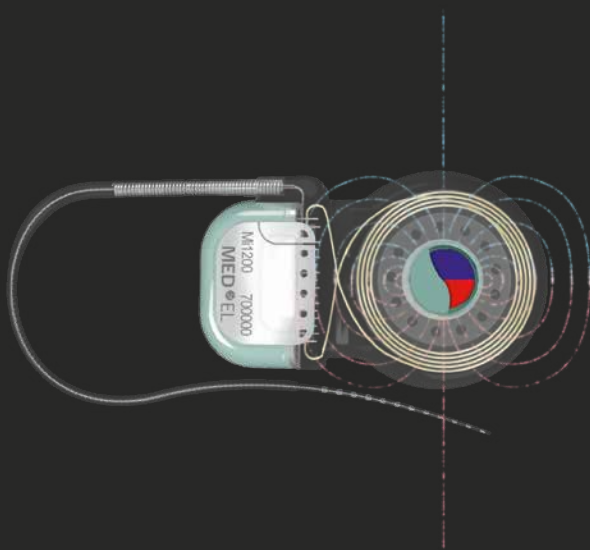

Nikoli ne veste, kaj prinese življenje, SYNCHRONY pa bo vašega otroka spremljal čez drn in strn. SYNCHRONY zagotavlja najvišjo varnost pri MRI od vseh polževih vsadkov s svojim izjemno varnim magnetom s samodejno poravnavo.

Seveda si vsakdo želi, da se njegov otrok izogne nepotrebnim operacijam – zato smo SYNCHRONY zasnovali z magnetom, ki se prosto vrte in se med slikanjem MRI samodejno poravnava z magnetnim poljem.

Pri SYNCHRONY za razliko od drugih polževih vsadkov ni potrebe po kirurški odstranitvi magneta niti pri visokoločljivem slikanju MRI s 3,0 T. Prav tako ne bo na vsadku občutil nobenega »vlečenja« vsadka, tako da bo ta med MRI za otroka udoben in varen.

* Uporabnike polževga vsadka SYNCHRONY je mogoče varno slikati z MRI pri 0,2, 1,0, 1,5 in 3,0 T po pogojih, podrobno opisanih v navodilih za uporabo.



V dobrih rokah

Bodite brez skrbi – dobro varujemo, kar je najdragocenejše. Naši vsadki so izdelani iz vzdržljivega titana in so dokazano dolgoročno zanesljivi. SYNCHRONY vključuje številne varnostne in zaščitne funkcije, zato je idealna izbira tudi za najdejavnejše otroke.

SYNCHRONY je zasnovan tako, da prenese nenameren udarec*, titanovi pritrilni zatiči pa zagotavljajo izjemno stabilnost – tako da vsadek ostane tam, kjer mu je mesto. SYNCHRONY pomeni zanesljivost, na katero lahko vi in vaš otrok vedno računata.

*SYNCHRONY je odporen na udarce do 2.5 Joula.

Dejanska velikost









Tukaj z vami

Zavedamo se, da boste na popotovanju vašega otroka do boljšega sluha morda imeli dodatna vprašanja. Nanje vam bomo z veseljem odgovorili. Na vsakem koraku vaše poti smo z vami in vam zagotavljamo predano nego in podporo.

Za več informacij se lahko obrnete na lokalno ekipo MED-EL, se povežete z našo skupnostjo na družabnih medijih in si preberete več o tem na našem spletnem mestu. Stopite v stik z nami še danes – tega se veselimo.

medel.com





Naš sedež
v Innsbrucku v Avstriji

MED-EL

Za vse življenje

Pri odločanju o polževem vsadku je pomembno vedeti, da ste izbrali družbo, na katero se lahko zanesete še veliko let. Družba MED-EL je gonilna sila inovacij na področju slušnih vsadkov že več kot 25 let. Naša ustanovitelja Ingeborg in Erwin Hochmair pa sta pionirja v raziskavah polževih vsadkov že več kot 40 let.

Popolna predanost nenehni podpori, oskrbi, raziskavam in razvoju ter dobremu počutju naših uporabnikov je del naše identitete. Če izberete MED-EL, boste lahko mirno spali z zavestjo, da ste izbrali podjetje, ki bo vse življenje skrbelo za sluh vašega otroka.

MED-EL Distributors Near You

Distributer za Slovenijo

DORIMPEX d.o.o.
Vojkova cesta 73
1000 Ljubljana, Slovenija
+386 5 901 17 43
dorimpex@t-2.net

POOBlašČENI SERVIS

SLUŠNI APARATI – WIDEX d.o.o.,
Resljeva 32
1000 Ljubljana, Slovenija
+386 1 234 57 00
widex@widex.si

MED-EL Offices Worldwide

AMERICAS

Argentina

medel@medel.com.ar

Canada

officecanada@medel.com

Colombia

office-colombia@medel.com

Mexico

office-mexico@medel.com

United States

implants@medelus.com

ASIA PACIFIC

Australia

office@medel.com.au

China

office@medel.net.cn

Hong Kong

office@hk.medel.com

India

implants@medel.in

Indonesia

office@id.medel.com

Japan

office-japan@medel.com

Malaysia

office@my.medel.com

Philippines

office@ph.medel.com

Singapore

office@sg.medel.com

South Korea

office@kr.medel.com

Thailand

office@th.medel.com

Vietnam

office@vn.medel.com

EMEA

Austria

office@at.medel.com

Belgium

office@be.medel.com

Denmark

nordic@medel.com

Finland

office@fi.medel.com

France

office@fr.medel.com

Germany

office@medel.de

Italy

ufficio.italia@medel.com

Netherlands

office@nl.medel.com

Norway

norge@medel.com

Portugal

office@pt.medel.com

South Africa

customerserviceZA@medel.com

Spain

office@es.medel.com

Sweden

nordic@medel.com

Switzerland

office-ch@medel.com

United Arab Emirates

office@ae.medel.com

United Kingdom

customerservice@medel.co.uk

MED-EL Medical Electronics

Fürstenweg 77a | 6020 Innsbruck, Austria | office@medel.com

medel.com

